

PROTOCOLLO
PELLE SANA

— RIVITALIZZA, RINNOVA, RIGENERA. —

PROCEDURA PROFESSIONALE

LIP VOLUME & EYE CARE

Trattamento combinato per labbra e contorno occhi

Acido ialuronico 3%

Flash Eye

DOCUMENTO OPERATIVO PROFESSIONALE | VERSIONE DA VALORIZZARE | ULTIMO AGGIORNAMENTO
DA VALORIZZARE



IL TRATTAMENTO COMBINATO

Questo esclusivo protocollo combina un doppio trattamento che rigenera contemporaneamente le due zone più espressive e delicate del tuo volto: il contorno occhi e le labbra. Un unico percorso di bellezza per un risultato d'impatto immediato mirato a migliorare i volumi delle labbra e perfezionare l'area perioculare.

TRATTAMENTO RIMPOLPANTE LABBRA

Le labbra sono il punto focale della sensualità e dell'espressività del viso. Con il passare del tempo, però, tendono a perdere turgore, idratazione e definizione. Scopri il nostro trattamento esclusivo di nanoneedling Labbra: l'alternativa non invasiva ai filler per labbra naturalmente rimpolpate, turgide e irresistibili.

Un vero e proprio bagno di Acido ialuronico per le labbra ideale come trattamento di preparazione, ma anche di mantenimento, al filler o agli interventi di dermo-pigmentazione per i suoi naturali effetti.

BENEFICI DEL TRATTAMENTO LABBRA

Effetto Plumping Naturale: Volume visibilmente aumentato senza stravolgerne i tratti.

Contorni Definiti: Ridefinisce ed esalta l'arco di cupido e il bordo labiale.

ZERO RUGHE: CANCELLA E LEVIGA LE MICRO-RUGHE DA SECCHENZA SULLE LABBRA.

Colore Ravvivato: Stimola la microcircolazione per labbra naturalmente più rosee e sane.

Idratazione Profonda: Contrasta la secchezza cronica, donando morbidezza assoluta.



ACIDO IALURONICO 3%

Soluzione sterile ad alta concentrazione di Acido ialuronico, una sostanza naturalmente presente nel nostro corpo, capace di trattenere fino a 1000 volte il suo peso in acqua. Applicato sulle labbra, contrasta l'invecchiamento, restituisce la naturale idratazione e dona un volume irresistibile.

TRATTAMENTO PERFEZIONANTE DEL CONTORNO OCCHI

La zona del contorno occhi è la più sottile e delicata del viso, la prima a mostrare i segni di stanchezza, stress e dell'ageing. Quando lo sguardo appare appesantito da occhiaie e gonfiori, l'intero volto perde la sua naturale luminosità.

Con il trattamento perfezionante del contorno occhi mettiamo a disposizione un protocollo d'avanguardia progettato specificamente per cancellare la stanchezza e restituire giovinezza e freschezza allo sguardo che combina l'azione del nanoneedling con principi attivi mirati per ottenere risultati soddisfacenti nella cura dello sguardo.

BENEFICI DEL TRATTAMENTO CONTORNO OCCHI

- Sguardo subito riposato e fresco, come dopo un lungo sonno rigenerante.
- Pelle del contorno occhi più compatta, elastica e protetta.
- Riduzione visibile del colorito grigio o bluastro tipico delle occhiaie.
- Occhi aperti e luminosi, pronti a valorizzare la tua naturale espressività.



FLASH EYE

- Soluzione antiossidante e anti-età per il trattamento del contorno occhi. Efficace nell'aiutare a ridurre borse e occhiaie grazie ai suoi attivi specifici: la Caffeina che attiva la microcircolazione aiutando a ridurre le borse, la Niacinamide che corregge le zone d'ombra schiarendo le occhiaie, l'Acido ialuronico che cancella i segni della disidratazione e i Peptidi biomimetici che stimolano il collagene riducendo la profondità delle rughe.

MODO D'USO E AVVERTENZE

Prodotti cosmetici sterili confezionati in flaconcini da 5 ml, destinati all'uso professionale ad esclusivo utilizzo topico sul viso con applicazioni manuali o con apparecchi (Dermapen/hydrapen/dermo-veicolatori). Non ingerire, non iniettare. Evitare il contatto con mucose, ferite e con gli occhi. In quest'ultimo caso, sciacquare abbondantemente con acqua. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

CONSERVAZIONE

Conservare a temperatura ambiente, preservandola dall'umidità e dal calore, in luogo fresco e asciutto, al riparo dalla luce. Utilizzare immediatamente dopo l'apertura e non oltre i 15 giorni dalla prima applicazione. Prelevare il prodotto con un'apposita siringa.

PREPARAZIONE AL TRATTAMENTO

- Dermapen
- Cartuccia nano
- Fiala Acido ialuronico 3%

- Fiala Flash Eye
- Siringa con ago da max 2 ml (per estrarre attivi dalle fiale)
- Golden Kiss Lip Mask
- Golden Eye Patch
- Repair Balm
- Eye Contour Exobio/ADRN Pro



PROTOCOLLO DI TRATTAMENTO NANONEEDLING


- 1 FIALA FLASH EYE:** Con la siringa, estrarre 0,5 ml di prodotto dalla fiala sterile dopo averla agitata per eseguire il protocollo di trattamento.
- 2 DERMAPEN:** applica la cartuccia nano sulla Dermapen regolando la profondità a 0,5 e la battuta ad un ritmo veloce. Inizia quindi ad applicare il prodotto sulla zona perioculare, lavorala con la Dermapen eseguendo micropulsazioni in modalità dinamica, prima su un occhio poi ripeti l'operazione sull'altro. Nella zona delle borse lavora eseguendo pressioni dall'interno verso l'esterno per favorire il drenaggio.



- 3 **GOLDEN EYE PATCH:** applica nella zona inferiore del contorno i patch, falli aderire perfettamente e lasciali in posa almeno 15 minuti.

- 4 **FIALA ACIDO IALURONICO 3%:** Con la siringa, estrarre 0,5 ml di prodotto dalla fiala sterile dopo averla agitata per eseguire il protocollo di trattamento e applicarlo sulle labbra.

- 5 **DERMAPEN:** applica la cartuccia nano sulla Dermapen regolando la profondità a 0,5 e la battuta ad un ritmo veloce. Inizia quindi ad applicare il prodotto sulla zona perioculare, lavorala con la Dermapen eseguendo micropulsazioni in modalità dinamica. Ripeti più volte l'applicazione del prodotto e i passaggi sul vermiglione.

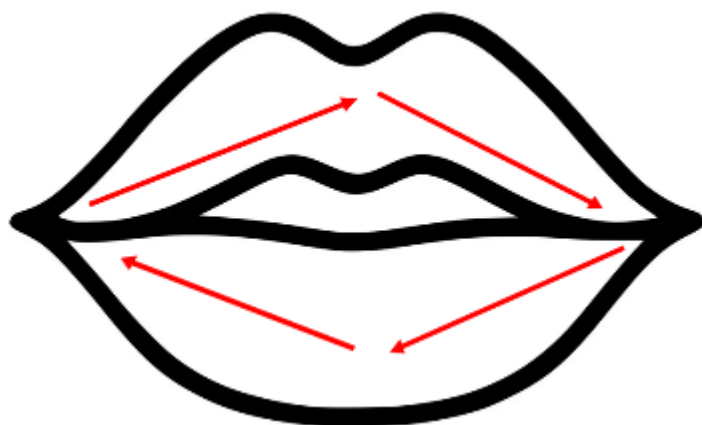

- 6 **GOLDEN KISS LIP MASK:** applicala sulle labbra facendola aderire perfettamente e lasciala in posa almeno 15 minuti.

7

FASE FINALE: Rimuovi quindi i patch dagli occhi e applica il CONTORNO OCCHI prescelto, quindi rimuovi anche la maschera dalle labbra ed applica il LIP BALM per terminare il trattamento.

PROTOCOLLO PELLE SANA